


Wie ist der **Anapen®** anzuwenden?



Überprüfung des **Anapen®** Autoinjektors

- (1) Drehen Sie die Abdeckung über den Sichtfenstern, um die Linsen mit den Sichtfenstern auszurichten.

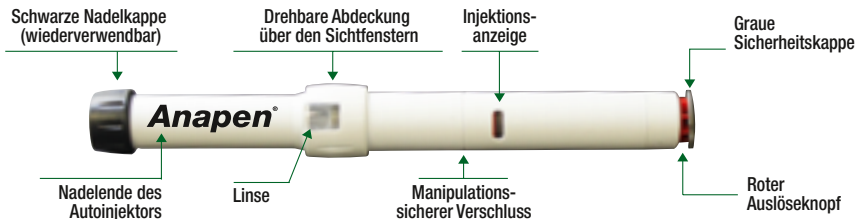

- (2) Schauen Sie durch die Linse in das Sichtfenster. Die Lösung muss klar und farblos sein. Wenn die Lösung getrübt oder verfärbt ist oder Schwebeteilchen enthält, muss der Anapen® entsorgt werden.



- (3) Achten Sie darauf, dass die Injektionsanzeige nicht rot ist.



Eine rote Anzeige bedeutet, dass der Anapen® bereits ausgelöst wurde und entsorgt werden muss.



- (4) Drehen Sie die Abdeckung über dem Sichtfenster, um sicherzustellen, dass beide Sichtfenster abgedeckt sind.

Anwendung des **Anapen®** Autoinjektors

- (A) Entfernen Sie die schwarze Nadelkappe durch kräftiges Ziehen. Gleichzeitig wird der graue Nadelschutz entfernt.



- (B) Entfernen Sie durch Ziehen die graue Sicherheitskappe vom roten Auslöseknopf.



- (C) Halten Sie das offene (Nadel-) Ende des Anapen® gegen die Außenseite Ihres Oberschenkels. Drücken Sie im Anschluss auf den roten Auslöseknopf, bis ein Klicken zu hören ist.




Der Anapen® kann gegebenenfalls auch durch leichte Kleidung hindurch angewendet werden.

Eine versehentliche Injektion in Hände oder Finger kann begrenzten Blutfluss und Verletzungen verursachen. In diesem Fall sollten Sie sich umgehend in das nächstgelegene Krankenhaus zur ärztlichen Behandlung begeben.

- (D) Halten Sie den Autoinjektor 10 Sekunden lang gegen Ihren Oberschenkel. Massieren Sie vorsichtig die Injektionsstelle.




Wie ist der **Anapen®** anzuwenden?

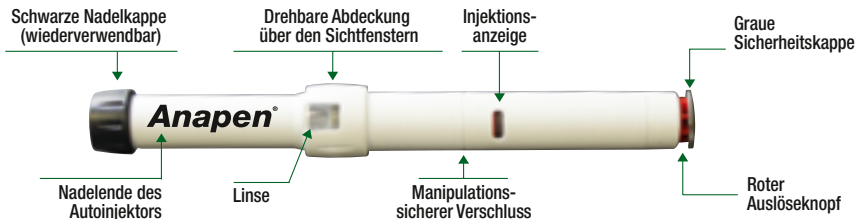

Nach der Anwendung des **Anapen®** Autoinjektors

- (E) Überprüfen Sie, ob sich die Injektions-anzeige rot gefärbt hat. Dies zeigt an, dass die Injektion vollständig abgeschlossen ist. Wenn die Injektions-anzeige nicht rot ist, muss die Injektion mit einem neuen **Anapen®** wiederholt werden.

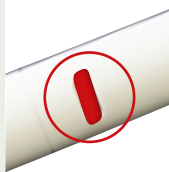

- (F) Rufen Sie sofort nach der Anwendung von **Anapen®** die Notfallnummer **112** an und geben Sie an, dass Sie eine intramuskuläre Adrenalininjektion aufgrund von „Anaphylaxie“ erhalten haben. Die Rettungskräfte werden nach ihrem Eintreffen die Entsorgung des benutzten Autoinjektors veranlassen.



- (G) Nach der Injektion ragt die Nadel aus dem Autoinjektor heraus. Stecken Sie das breite Ende der schwarzen Nadelkappe auf das offene (Nadel-)Ende des **Anapen®**, um die Nadel abzudecken.

Bei fehlender Verbesserung der Symptome oder falls eine Verschlechterung auftritt, kann eine zweite Injektion mit einem zusätzlichen **Anapen® Autoinjektor 5-15 Minuten nach der ersten Injektion angewendet werden. Daher sollten Sie immer 2 **Anapen®** Autoinjektoren mit sich führen.**

Um Verwechslungen in Notfallsituationen zu vermeiden, sollten der **Anapen® Autoinjektor und das für die Demonstration der richtigen Anwendung erhältliche Trainingsgerät nicht zusammen aufbewahrt werden.**

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: <http://www.bfarm.de> anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.